

# CARTERA DE SERVICIOS DE MICROBIOLOGÍA



## ÍNDICE

<a href="#"><u>Absceso (genérico)</u></a>	5	<a href="#"><u>Exudado axilar</u></a>	23
<a href="#"><u>Agua</u></a>	6	<a href="#"><u>Exudado balano-prepucial</u></a>	24
<a href="#"><u>Aire</u></a>	7	<a href="#"><u>Exudado conjuntival</u></a>	25
<a href="#"><u>Aspirado aparato lagrimal</u></a>	7	<a href="#"><u>Exudado de herida</u></a>	26
<a href="#"><u>Aspirado nasofaríngeo</u></a>	8	<a href="#"><u>Exudado de herida (quirúrgica)</u></a>	28
<a href="#"><u>Biopsia (genérico)</u></a>	11	<a href="#"><u>Exudado endocervical</u></a>	28
<a href="#"><u>Biopsia corneal</u></a>	13	<a href="#"><u>Exudado endometrial</u></a>	30
<a href="#"><u>Biopsia gástrica</u></a>	14	<a href="#"><u>Exudado esofágico</u></a>	30
<a href="#"><u>Catéter (punta)</u></a>	15	<a href="#"><u>Exudado faríngeo</u></a>	31
<a href="#"><u>Córnea (raspado)</u></a>	15	<a href="#"><u>Exudado mucosa (boca)</u></a>	32
<a href="#"><u>Dispositivo biomédico</u></a>	16	<a href="#"><u>Exudado nasal</u></a>	32
<a href="#"><u>Ectoparásito</u></a>	17	<a href="#"><u>Exudado nasofaríngeo</u></a>	33
<a href="#"><u>Endoscopios (agua de los canales)</u></a>	17	<a href="#"><u>Exudado ótico (oído externo)</u></a>	36
<a href="#"><u>Endoscopios (superficie del endoscopio)</u></a>	17	<a href="#"><u>Exudado ótico (oído medio)</u></a>	36
<a href="#"><u>Espujo</u></a>	18	<a href="#"><u>Exudado palpebral</u></a>	37
<a href="#"><u>Espujo inducido</u></a>	20	<a href="#"><u>Exudado perianal</u></a>	37
<a href="#"><u>Exudado aparato lagrimal</u></a>	22	<a href="#"><u>Exudado rectal</u></a>	38






## INDICE

<a href="#"><u>Exudado úlcera (por presión)</u></a>	40	<a href="#"><u>Líquido diálisis peritoneal</u></a>	59
<a href="#"><u>Exudado uretral</u></a>	41	<a href="#"><u>Líquido pericárdico</u></a>	60
<a href="#"><u>Exudado vaginal</u></a>	42	<a href="#"><u>Líquido pleural</u></a>	62
<a href="#"><u>Exudado vagino-rectal</u></a>	43	<a href="#"><u>Líquido sinovial</u></a>	63
<a href="#"><u>Fómite</u></a>	44	<a href="#"><u>Líquido sinovial (infección protésica)</u></a>	65
<a href="#"><u>Heces</u></a>	44	<a href="#"><u>Médula ósea</u></a>	65
<a href="#"><u>Humor acuoso</u></a>	47	<a href="#"><u>Orina</u></a>	67
<a href="#"><u>Humor vítreo</u></a>	48	<a href="#"><u>Orina (bolsa pediátrica)</u></a>	70
<a href="#"><u>Leche materna</u></a>	49	<a href="#"><u>Orina (catéter)</u></a>	71
<a href="#"><u>Lente intraocular</u></a>	50	<a href="#"><u>Orina (media)</u></a>	71
<a href="#"><u>Lente de contacto</u></a>	51	<a href="#"><u>Orina (postmasaje protático)</u></a>	71
<a href="#"><u>Lente de contacto (líquido)</u></a>	51	<a href="#"><u>Orina (punción)</u></a>	72
<a href="#"><u>Líquido amniótico</u></a>	52	<a href="#"><u>Orina (sonda vesical)</u></a>	72
<a href="#"><u>Líquido ascítico</u></a>	52	<a href="#"><u>Pelo</u></a>	73
<a href="#"><u>Líquido biliar</u></a>	54	<a href="#"><u>Piel (escamas)</u></a>	73
<a href="#"><u>Líquido cefalorraquídeo</u></a>	54	<a href="#"><u>Placenta</u></a>	74
<a href="#"><u>Líquido de vesícula cutánea</u></a>	59	<a href="#"><u>Prótesis articular</u></a>	74

## INDICE

<u>Prótesis valvular</u>	75
<u>Sala limpia</u>	75
<u>Sangre</u>	76
<u>Secreción broncoalveolar (lavado)</u>	95
<u>Secreción bronquial (aspirado)</u>	100
<u>Secreción bronquial (catéter telescopado)</u>	102
<u>Secreción gastroduodenal (aspirado)</u>	103
<u>Secreción seno paranasal (aspirado)</u>	104
<u>Secreción traqueal (aspirado)</u>	105
<u>Semen</u>	107
<u>Úlcera genital</u>	108
<u>Uña</u>	108
<u>Válvula cardíaca</u>	109

## Absceso (genérico)


ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Contenedor anaerobios (Portagerm)		6 días	Total	Seleccionar parámetro complementario (procedencia)	329761
Cultivo de Micobacterias	Tubo estéril tapón de rosca		46 días	Total		392686
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex, detección ADN	Tubo estéril tapón de rosca		7 días	Total	Indicar procedencia en la petición	392686
Tinción de BAAR	Tubo estéril tapón de rosca		3 días	Total		392686
Tinción de Gram	Contenedores anaerobios (Portagerm)		1 día	Total	Indicar procedencia en la petición	329761

## Absceso (genérico)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Tinción de Gram (urgente)</b>	Contenedores anaerobios (Portagerm) 		2 horas		Solicitar en la petición MPA en "datos de Interés analítico". Contactar con el laboratorio por teléfono.	329761 746761
<b>Tinción de BAAR (urgente)</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		5 horas		Solicitar en la petición MPA en "datos de Interés analítico". Contactar con el laboratorio por teléfono.	392686 746761

## Agua

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de bacterias</b>	Frasco estéril tapa roja 	200 mL	7 días	Restringido	Agua de aclarado de lavadoras Agua del sifón Determinación restringida para el Servicio de Medicina Preventiva. Contactar previamente con el Laboratorio de Microbiología.	374249

Aire						
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de hongos (Recuento)</b>	Placa de Petri con medio Czapek 		7 días	Restringido	Determinación restringida para el Servicio de Medicina Preventiva. Contactar previamente con el Laboratorio de Microbiología.	374249

Aspirado aparato lagrimal						
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de bacterias</b>	Contenedores anaerobios (Portagerm) 		7 días	Total	Indicar en la hoja de petición la localización de la muestra: - saco lagrimal - glándula - canalículo	329763
<b>Cultivo de hongos</b>	Contenedores anaerobios (Portagerm) 		7 días	Total	Indicar en la hoja de petición la localización de la muestra: - saco lagrimal - glándula - canalículo	329763

## Aspirado nasofaríngeo


ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Adenovirus, detección ADN</b>	Swab tapón morado 		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b>Bordetella pertussis, detección ADN</b>	Swab tapón morado 		1 día	Total		329763
<b>Enterovirus, detección ARN</b>	Swab tapón morado 		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b>Metapneumovirus, detección ARN</b>	Swab tapón morado 		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b>Mycoplasma pneumoniae, detección ADN</b>	Swab tapón morado 		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722








## Aspirado nasofaríngeo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Rhinovirus, detección ARN</b>	Swab tapón morado 		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b>SARS Coronavirus 2, detección ARN</b>	Swab tapón morado 		5 horas	Restringido	Consulte los procedimientos del Hospital: "Procedimiento Solicitud de PDIA en el momento del ingreso o durante la estancia hospitalaria"	329763
<b>Virus de la influenza A, detección ARN</b>	Swab tapón morado 		5 horas	Restringido	Restringido según protocolo de la Comisión de Infecciones	329763
<b>Virus de la influenza B, detección ARN</b>	Swab tapón morado 		5 horas	Restringido	Restringido según protocolo de la Comisión de Infecciones	329763
<b>Virus de la parainfluenza 1,2,3,4, detección ARN</b>	Swab tapón morado 		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722









## Aspirado nasofaríngeo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Virus respiratorio Sincitial, detección ARN</b>	Swab tapón morado 		5 horas	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	329763

## Biopsia (genérico)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Citomegalovirus, detección antígeno precoz</b>	Swab tapón morado 		4 días	Restringido		652722
<b>Cultivo Citomegalovirus</b>	Swab tapón morado 		30 días	Restringido		652722
<b>Cultivo de <i>Acanthamoeba spp</i></b>	Frasco estéril tapa roja o Tubo estéril tapón de rosca 		7 días	Total	Sólo se realiza el cultivo en muestra de Raspado corneal.	329763
<b>Cultivo de bacterias</b>	Frasco estéril tapa roja o Tubo estéril tapón de rosca 		10 días	Total	Seleccionar parámetro complementario (procedencia). Añadir suero fisiológico estéril.	329761
<b>Cultivo de hongos</b>	Frasco estéril tapa roja o Tubo estéril tapón de rosca 		37 días	Total	Seleccionar parámetro complementario (procedencia). Añadir suero fisiológico estéril.	329761



## Biopsia (genérico)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b><i>Leishmania spp.</i>, detección ADN</b>	Frasco estéril tapa roja o Tubo estéril tapón de rosca	 	3 días	Restringido	Añadir el mínimo volumen de suero fisiológico necesario para cubrir la biopsia	652722
<b><i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex, detección ADN</b>	Frasco estéril tapa roja o Tubo estéril tapón de rosca	 	7 días	Total	Indicar procedencia en la petición	392686
<b>Tinción de BAAR</b>	Frasco estéril tapa roja o Tubo estéril tapón de rosca	 	3 días	Total	Indicar procedencia en la petición	392986
<b>Tinción de BAAR (Urgente)</b>	Frasco estéril tapa roja o Tubo estéril tapón de rosca	 	5 horas	Total	Indicar procedencia en la petición. Solicitar en la petición MPA en "datos de interés analítico". Contactar con el laboratorio por teléfono.	392686 746761


## Biopsia (genérico)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Tinción de Giemsa</b>	Frasco estéril tapa roja o Tubo estéril tapón de rosca  		2 días	Total	Indicar en "localización": Biopsia cutánea	374249
<b>Tinción de Gram (Urgente)</b>	Frasco estéril tapa roja o Tubo estéril tapón de rosca  		2 horas	Total	Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico". Contactar previamente con el laboratorio.	329761 746761

## Biopsia corneal

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de bacterias</b>	Tubo con caldo de Tioglicolato de 2 mL 		7 días	Total	Contenedor suministrado por el laboratorio de Microbiología. Contactar con el laboratorio antes de tomar la muestra para solicitar material	329763
<b>Cultivo de hongos</b>	Tubo con caldo de Tioglicolato de 2 mL 		7 días	Total	Contenedor suministrado por el laboratorio de Microbiología. Contactar con el laboratorio antes de tomar la muestra para solicitar material	329763


## Biopsia corneal

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Tinción de Gram</b>	Tubo con caldo de Tioglicolato de 2 mL 		3 horas	Total	Contenedor suministrado por el laboratorio de Microbiología. Contactar con el laboratorio antes de tomar la muestra para solicitar material	329763

## Biopsia gástrica

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo <i>Helicobacter pylori</i></b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		15 días	Total	Solo se realiza en muestra de biopsia gástrica. El transporte al laboratorio debe realizarse en menos de 30 minutos. Añadir el mínimo volumen de suero fisiológico para cubrir la biopsia.	329761
<b><i>Helicobacter pylori</i>, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		20 días	Restringido	El transporte al laboratorio debe realizarse en menos de 30 minutos	329761 652722

## Catéter (punta)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Frasco estéril tapa roja 		5 días	Total	Sólo se envía al laboratorio la punta del catéter. Debe ir acompañado de un hemocultivo seriado	329771

## Cornea (raspado)


ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo <i>Acanthamoeba spp</i>	Tubo con caldo de Tioglicolato de 2 mL 		7 días	Total	Contactar con el laboratorio antes de tomar la muestra para solicitar material	329763
Cultivo de bacterias	Tubo con caldo de Tioglicolato de 2 mL 		7 días	Total	Contactar con el laboratorio antes de tomar la muestra para solicitar material	329763
Cultivo de hongos	Tubo con caldo de Tioglicolato de 2 mL 		7 días	Total	Contactar con el laboratorio antes de tomar la muestra para solicitar material	329763

## Cornea (raspado)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Tinción de Gram	Tubo con caldo de Tioglicolato de 2 mL 		2 horas	Total	Contactar con el laboratorio antes de tomar la muestra para solicitar material	329763
Virus del herpes simple 1 y 2, detección ADN (muestra biológica)	Swab tapón morado 		3 días	Total		652722


## Dispositivo biomédico

(dispositivos electroestimulación cardiaca, dispositivos neuroestimulador cerebral, implantes cocleares, material osteosíntesis, malla quirúrgica, petaca marcapasos, prótesis mamaria, prótesis vascular, prótesis valvular, reservorio port-a-cath, cables de marcapasos)


ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Contenedor estéril de tamaño adecuado a la muestra 		12 días	Total	Seleccionar parámetro complementario (procedencia). Cubrir el dispositivo con solución Ringer con un volumen adecuado al tamaño de la muestra.	329761




## Ectoparásito

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Identificación ectoparásito	Frasco estéril tapa roja 		5 días	Total	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	329764


## Endoscopios (Agua de los canales)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Tubo Falcon con suero fisiológico 	20 mL	7 días	Restringido	Determinación restringida para el Servicio de Medicina Preventiva. Contactar previamente con el Laboratorio de Microbiología para solicitar material.	374249



## Endoscopios (superficie del endoscopio)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Torunda en tubo con caldo de Tioglicolato 		7 días	Restringido	Determinación restringida para el Servicio de Medicina Preventiva. Contactar previamente con el Laboratorio de Microbiología para solicitar material.	374249

## Esputo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Frasco estéril tapa roja 		5 días	Total		329763
Cultivo de <i>Legionella pneumophila</i>	Frasco estéril tapa roja 		7 días	Total		329763
Cultivo de Micobacterias	Frasco estéril tapa roja 		46 días	Total		392686
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex, detección ADN	Frasco estéril tapa roja 		7 días	Total		392686
Tinción de BAAR	Frasco estéril tapa roja 		3 días	Total		392686

## Esputo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Tinción de BAAR (urgente)</b>	Frasco estéril tapa roja 		5 horas	Total	Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de interés analítico". Contactar previamente con el laboratorio.	392686 746761
<b>Tinción de Gram</b>	Frasco estéril tapa roja 		1 día	Total		329763



## Esputo inducido

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Frasco estéril tapa roja 		5 días	Total		329763
Tinción de Gram	Frasco estéril tapa roja 		1 día	Total		329763
Cultivo de Micobacterias	Frasco estéril tapa roja 	3 ml	46 días	Total		392686
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex, detección ADN	Frasco estéril tapa roja 		7 días	Total		392686
Tinción de BAAR	Frasco estéril tapa roja 	3 mL	3 días	Total		392686





## Espuito inducido

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b><i>Pneumocystis jirovecii</i> (tinción)</b>	Frasco estéril tapa roja 	3 mL	1 día	Restringido	Determinación restringida según protocolo.	329763
<b><i>Pneumocystis jirovecii</i>, detección ADN</b>	Frasco estéril tapa roja 	3 mL	3 día	Restringido	Determinación restringida según protocolo.	329763


## Exudado aparato lagrimal

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de bacterias</b>	Swab tapón rosa		7 días	Total	Indicar en la hoja de petición la localización de la muestra: - saco lacrimal - glándula -canalículo	329763
<b>Cultivo de hongos</b>	Swab tapón rosa		7 días	Total	Indicar en la hoja de petición la localización de la muestra: - saco lagrimal - glándula -canalículo	329763

## Exudado axilar

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Detección de <i>Candida parasilopsis</i> resistente a fluconazol</b>	Swab tapón rosa 		5 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas	374249
<b>Enterobacterias con b-lactamasa de espectro ampliado, detección</b>	Swab tapón rosa 		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas	374249
<b>Enterobacterias productoras de carbapenemasas, detección</b>	Swab tapón rosa 		5 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas	374249
<b>Portadores de <i>Acinetobacter baumannii</i> multirresistente, detección</b>	Swab tapón rosa 		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas	374249

## Exudado balano-prepucial


ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de hongos	Swabs tapón rosa 		4 días	Total		329761







## Exudado conjuntival

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Adenovirus, detección ADN</b>	Swab tapón morado 		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b>Cultivo de bacterias</b>	Swabs tapón rosa 		5 días	Total	Indicar en la hoja de petición de MPA ("datos de interés analítico") si se sospecha infección por <i>Neisseria gonorrhoeae</i> y/o <i>Chlamydia trachomatis</i>	329763
<b>Tinción de Gram</b>	Swab tapón rosa 		1 día	Total	Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico". Contactar previamente con el laboratorio.	329763
<b><i>Chlamydia trachomatis</i>, detección ADN</b>	Swab tapón morado 		4 días	Total		652722
<b><i>Neisseria gonorrhoeae</i>, detección ADN</b>	Swab tapón morado 		4 día	Total		652722

## Exudado de herida

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Enterobacterias con b-lactamasa de espectro ampliado, detección</b>	Swab tapón rosa 		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y a otras unidades asistenciales autorizadas	374249
<b><i>Acinetobacter baumannii</i> multirresistente, detección</b>	Swab tapón rosa 		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y a otras unidades asistenciales autorizadas	374249
<b>Cultivo de bacterias</b>	Swab tapón rosa 		4 días	Total		329761
<b>Enterobacterias productoras de carbapenemasas, detección</b>	Swab tapón rosa 		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial	374249
<b><i>Staphylococcus aureus</i> resistente a meticilina, detección</b>	Swab tapón rosa 		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial	374249


## Exudado de herida

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Tinción de Gram</b>	Swab tapón rosa 		1 día	Total	Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico". Contactar previamente con el laboratorio.	329761
<b>Virus de la varicela-zoster, detección ADN</b>	Swab tapón morado 		3 días	Total		652722
<b>Virus de la viruela del mono, detección ADN</b>	Swab tapón morado 		3 días	Total		652722
<b>Virus del herpes simple 1+2, detección ADN</b>	Swab tapón morado 		3 días	Total		652722

## Exudado de herida (quirúrgica)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Swab tapón rosa o contenedor Portagerm 		4 días	Total	Es importante indicar que es un exudado de herida quirúrgica	329761
Tinción de Gram	Swab tapón rosa o contenedor Portagerm 		1 día	Total	Es importante indicar que es un exudado de herida quirúrgica	329761
Tinción de Gram (urgente)	Swab tapón rosa o contenedor Portagerm 		2 horas	Total	Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico". Contactar previamente con el laboratorio.	329761 746761

## Exudado endocervical

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<i>Chlamydia trachomatis</i> , detección ADN	Swab tapón amarillo 		7 días	Total		652722


## Exudado endocervical

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de <i>Neisseria gonorrhoeae</i></b>	Swab tapón rosa 		4 días	Total	Solicitar SIEMPRE como: <b>Perfil ITS Endocervicitis</b> , donde está incluido el cultivo y la detección de ADN de los patógenos implicados.	329761
<b><i>Mycoplasma genitalium</i>, detección ADN</b>	Swab tapón amarillo 		7 días	Total		652722
<b><i>Neisseria gonorrhoeae</i>, detección ADN</b>	Swab tapón amarillo 		7 días	Total		652722
<b>Virus del papilomavirus humano, detección ADN (ex. endocervical)</b>	Contenedor blanco VPH 		10 días	Restringido	Contenedor disponible en los puntos de toma de muestra.	652722




## Exudado endometrial

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Contenedores anaerobios (Portagerm)		6 días	Total		329761
Tinción de Gram	Contenedores anaerobios (Portagerm)		1 día	Total		329761
Tinción de Gram (urgente)	Contenedores anaerobios (Portagerm)		2 horas	Total	Solicitar en la petición MPA en "datos de Interés analítico". Contactar con el laboratorio por teléfono.	329761 746761


## Exudado esofágico

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de hongos	Swab tapón rosa		3 días	Total		329761



## Exudado faríngeo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Swab tapón rosa 		4 días	Total		329763
Cultivo de <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Swab tapón rosa 		4 días	Total	Solicitar SIEMPRE como: <b>Perfil ITS Endocervicitis</b> , donde está incluido el cultivo y la detección de ADN de los patógenos implicados.	329761
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> , detección ADN	Swab tapón amarillo 		7 días	Total		652722

## Exudado mucosa (boca)






ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de hongos	Swab tapón rosa 		5 días	Total		329761

## Exudado nasal





ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de <i>Staphylococcus aureus</i>	Swab tapón rosa 		5 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas	374249
<i>Staphylococcus aureus</i> resistente a meticilina, detección	Swab tapón rosa 		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas	374249




## Exudado nasofaríngeo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Adenovirus, detección ADN</b>	Swab tapón morado 		5 horas	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra	652722
<b>Bordetella pertussis, detección ADN</b>	Swab tapón morado 		1 día	Total		329763
<b>Enterovirus, detección ARN</b>	Swab tapón morado 		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra	652722
<b>Metapneumovirus, detección ARN</b>	Swab tapón morado 		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b>Mycoplasma pneumoniae, detección ADN</b>	Swab tapón morado 		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722



## Exudado nasofaríngeo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Rhinovirus, detección ARN</b>	Swab tapón morado		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b>SARS Coronavirus 2, detección ARN</b>	Swab tapón morado		5 horas	Restringido	Consulte los procedimientos del Hospital: "Procedimiento Solicitud de PDIA en el momento del ingreso o durante la estancia hospitalaria"	329763
<b>Virus de la influenza A, detección ARN</b>	Swab tapón morado		5 horas	Restringido	Restringido a pacientes hospitalizados según protocolo de la Comisión de Infecciones	329763
<b>Virus de la influenza B, detección ARN</b>	Swab tapón morado		5 horas	Restringido	Restringido a pacientes hospitalizados según protocolo de la Comisión de Infecciones	329763
<b>Virus de la parainfluenza 1,2,3,4, detección ARN</b>	Swab tapón morado		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722



## Exudado nasofaríngeo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Virus respiratorio sincitial, detección ARN</b>	Swab tapón morado 		5 horas	Restringido	Restringido según protocolo de la Comisión de Infecciones	329763
<b>Antígeno SARS CoV-2, detección</b>	Material específico disponible en los puntos de extracción		5 horas	Total		329763


## Exudado ótico (oído externo)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Swab tapón rosa 		4 días	Total		329763
Tinción de Gram	Swab tapón rosa 		1 día	Total		329763

## Exudado ótico (oído medio)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Swab tapón rosa 		4 días	Total	Si sospecha microorganismos anaerobios, incluir un contenedor Portagerm	329763
Tinción de Gram	Swab tapón rosa 		1 día	Total		329763






## Exudado palpebral

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de bacterias</b>	Swab tapón rosa 		5 días	Total	Indicado en las siguientes circunstancias: - Blefaritis anterior recurrente e inflamación severa - Pacientes que no responden a tratamiento.  Indicar en la petición MPA en el apartado "datos de interés analítico", la localización de la muestra: Exudado palpebral	329763




## Exudado perianal

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de <i>Streptococcus pyogenes</i></b>	Swab tapón rosa 		4 días	Total		329761
<b>Test de Graham (ex. perianal)</b>	Cinta adhesiva transparente pegada a un portaobjetos 		3 días	Total	Introducir el portaobjeto dentro de un contenedor	329764



## Exudado rectal

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Enterobacterias con b- lactamasa de espectro ampliado, detección</b>	Swab tapón rosa 		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas	374249
<b>Acinetobacter baumannii multirresistente, detección</b>	Swab tapón rosa 		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas	374249
<b>Chlamydia trachomatis, detección ADN</b>	Swab tapón amarillo 		7 días	Total		652722
<b>Cultivo de Neisseria gonorrhoeae</b>	Swab tapón rosa 		4 días	Total	Solicitar: <b>ITS proctitis</b> Indicar en "datos de interés analítico": sospecha o contacto ITS	329761
<b>Enterobacterias productoras de carbapenemasas, detección</b>	Swab tapón rosa 		5 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas	374249

## Exudado rectal






ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b><i>Mycoplasma genitalium</i>, detección ADN</b>	Swab tapón amarillo 		7 días	Total		652722
<b><i>Neisseria gonorrhoeae</i>, detección ADN</b>	Swab tapón amarillo 		7 días	Total		652722
<b>Detección de <i>Candida parasilopsis</i> resistente a fluconazol</b>	Swab tapón rosa 		5 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas. Indicar solicitud en hoja de petición, datos de interés analíticos.	374249

## Exudado úlcera (por presión)





ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Tinción de Gram	Swab tapón rosa o contenedor Portagerm 		1 día	Total		329761
Cultivo de Bacterias	Swab tapón rosa o contenedor Portagerm 		4 días	Total		329761



## Exudado uretral

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<i>Chlamydia trachomatis</i> , detección ADN	Swab tapón amarillo 		7 días	Total		652722
Cultivo de <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Swab tapón naranja 		5 días	Total	Solicitar SIEMPRE como: <b>Perfil ITS Uretritis</b> , donde está incluido el cultivo y la detección de ADN de los patógenos implicados.	329761
<i>Mycoplasma genitalium</i> , detección ADN	Swab tapón amarillo 		7 días	Total		652722
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> , detección ADN	Swab tapón amarillo 		7 días	Total		652722
Tinción de Gram (Urgente)	Swab tapón naranja 		2 horas	Total	Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico".  <b>Contactar previamente con el laboratorio.</b>	329761 746761

## Exudado vaginal

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<i>Chlamydia trachomatis</i> , detección ADN	Swab tapón amarillo		7 días	Total		652722
Cultivo bacterias y hongos	Swab tapón rosa		4 días	Total	Solicitar como <b>Perfil ITS vaginitis</b> si hay sospecha o contacto de ITS.	329761
<i>Mycoplasma genitalium</i> , detección ADN	Swab tapón amarillo		7 días	Total		652722
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> , detección ADN	Swab tapón amarillo		7 días	Total		652722

## Exudado vagino-rectal

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo <i>Streptococcus agalactiae</i>	Swab tapón rosa 		6 días	Total		329761






## Fómite

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de bacterias</b>	Contenedor específico. Contactar con el laboratorio.		7 días	Restringido	Determinación restringida para el Servicio de Medicina Preventiva. Contactar previamente con el Laboratorio de Microbiología.	374249

## Heces




ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Estudio de parásitos</b>	Contenedor específico para parásitos con conservante 		3 días	Total	Cerrar correctamente el contenedor. No tirar el líquido contenido en el envase. Para pacientes hospitalizados, solicitar el contenedor al laboratorio de Microbiología.	329764
<b><i>Clostridium difficile</i> (toxina A+B), detección ADN</b>	Frasco estéril tapa roja 	5 mL	3 horas	Total	Enviar heces diarreicas. Las heces sólidas se rechazarán por el laboratorio.	329764
<b>Cultivo de bacterias</b>	Frasco estéril tapa roja 	5 ml	4 días	Total	Sólo se procesan heces diarreicas. Las muestras de heces sólidas son rechazadas en el laboratorio.	329764

## Heces




ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de Micobacterias</b>	Frasco estéril tapa roja 	5 mL	46 días	Total	Estudio restringido a pacientes inmunodeprimidos.	392686
<b>Detección Adenovirus, Ag</b>	Frasco estéril tapa roja 	5 mL	2 horas* 4 días	Niños < 5 años SIN ingreso hospitalario en el periodo noviembre-mayo. *Niños < de 5 años CON ingreso hospitalario disponible todo el año	Sólo se procesan heces diarreicas. Las muestras de heces sólidas son rechazadas en el laboratorio.	329764
<b>Detección Astrovirus, Ag</b>	Frasco estéril tapa roja 	5 mL	2 horas* 4 días	Niños < 5 años SIN ingreso hospitalario en el periodo noviembre-mayo. *Niños < de 5 años con ingreso hospitalario disponible todo el año	Sólo se procesan heces diarreicas. Las muestras de heces sólidas son rechazadas en el laboratorio.	329764
<b>Detección de <i>Cryptosporidium</i></b>	Frasco estéril tapa roja 	5 mL	3 día	Total		329764
<b>Detección <i>Helicobacter pylori</i>, Ag</b>	Frasco tapón azul con cucharilla 	5 mL	3 días	Total	Para pacientes hospitalizados, solicitar el contenedor al laboratorio de Microbiología.	329764

## Heces



ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA	
<b>Detección Norovirus, Ag</b>	Frasco estéril tapa roja		5 mL	2 horas* 4 días	Niños < 5 años SIN ingreso hospitalario en el periodo noviembre-mayo. *Niños < de 5 años con ingreso hospitalario disponible todo el año	Sólo se procesan heces diarreicas.  Las muestras de heces sólidas son rechazadas en el laboratorio.	329764
<b>Detección Rotavirus, Ag</b>	Frasco estéril tapa roja		5 mL	2 horas* 4 días	Niños < 5 años SIN ingreso hospitalario en el periodo noviembre-mayo. *Niños < de 5 años con ingreso hospitalario disponible todo el año	Sólo se procesan heces diarreicas.  Las muestras de heces sólidas son rechazadas en el laboratorio.	329764
<b>E. coli productor de toxina shiga, detección ADN</b>	Frasco estéril tapa roja		5 mL	2 días	Restringido	Contactar previamente con el laboratorio	329764
<b>Mycobacterium tuberculosis complex, detección ADN</b>	Frasco estéril tapa roja		5 mL	7 días	Total		392686

Humor acuoso							
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA	
<b>Citomegalovirus, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		4 días	Restringido	Contactar previamente con el laboratorio	652722	
<b>Cultivo bacterias y hongos</b>	Tubo con caldo de Tioglicolato de 2 mL 		7 días	Total	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra. En volúmenes de humor acuoso superior a 0,4 mL proceder de la siguiente manera: - introducir 0,1 -0,2 mL en el tubo de caldo tioglicolato de 1 mL. - Introducir el resto de la muestra (máximo 3 mL) en un frasco de hemocultivo pediátrico.	329763	
<b>Tinción de Gram</b>	Tubo con caldo de Tioglicolato de 2 mL 		1 día	Total	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra. En volúmenes de humor acuoso superior a 0,4 mL proceder de la siguiente manera: - introducir 0,1 -0,2 mL en el tubo de caldo tioglicolato de 1 mL. - Introducir el resto de la muestra (máximo 3 mL) en un frasco de hemocultivo pediátrico.	329763	
<b>Virus del herpes simple 1+2, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		4 días	Restringido	Contactar previamente con el laboratorio	652722	



## Humor vítreo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Citomegalovirus, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		4 días	Restringido	Contactar previamente con el laboratorio	652722
<b>Cultivo bacterias y hongos</b>	Tubo con caldo de Tioglicolato de 2 mL 		7 días	Total	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra. En volúmenes de humor acuoso superior a 0,4 mL proceder de la siguiente manera: - introducir 0,1 -0,2 mL en el tubo de caldo tioglicolato de 1 mL. - Introducir el resto de la muestra (máximo 3 mL) en un frasco de hemocultivo pediátrico.	329763
<b>Tinción de Gram</b>	Tubo con caldo de Tioglicolato de 2 mL 		1 día	Total	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra. En volúmenes de humor acuoso superior a 0,4 mL proceder de la siguiente manera: - introducir 0,1 -0,2 mL en el tubo de caldo tioglicolato de 1 mL. - Introducir el resto de la muestra (máximo 3 mL) en un frasco de hemocultivo pediátrico.	329763




Leche materna							TELÉFONO DE CONSULTA
ANÁLISIS	CONTENEDOR		VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	
<b>Citomegalovirus, detección ADN</b>	Frasco estéril tapa roja		1 mL	3 días	Total		652722
<b>Cultivo de bacterias</b>	Frasco estéril tapa roja			4 días	Total	Indicar en "datos de interés analítico" si es leche de donante	329761

## Lente intraocular

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de bacterias</b>	Tubo estéril tapón de rosca		7 días	Total	Contactar con el laboratorio antes de tomar la muestra para solicitar material	329761
<b>Cultivo de hongos</b>	Tubo estéril tapón de rosca		7 días	Total	Contactar con el laboratorio antes de tomar la muestra para solicitar material	329761

Lentes de contacto						
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de <i>Acanthamoeba</i> spp.	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		7 días	Total	Añadir suero fisiológico,	329763

Lentes de contacto (líquido)						
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de <i>Acanthamoeba</i> spp.	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		7 días	Total		329763

## Líquido amniótico



ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Citomegalovirus, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde		4 días	Restringido	Contactar con el laboratorio para diagnóstico molecular de otros microorganismos	652722
<b>Cultivo de bacterias</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm		6 días	Total		329761
<b>Tinción de Gram (urgente)</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm		2 horas	Total	Disponible como determinación urgente bajo petición telefónica. Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico"	329761 746761

## Líquido ascítico

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de bacterias</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm		6 días	Total	En peritonitis primaria inocular la muestra en un frasco de hemocultivo.	329761

Líquido ascítico							
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA	
Cultivo de Micobacterias	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		46 días	Total		392686	
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex, detección ADN	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		7 días	Total		392686	
Tinción de BAAR	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		3 días	Total		392686	
Tinción de Gram (urgente)	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		2 horas	Total	Disponible como determinación urgente bajo petición telefónica. Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico"	329761 746761	




## Líquido biliar

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm 		6 días	Total		329761
Tinción de Gram (Urgente)	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm 		2 horas	total	Disponible como determinación urgente bajo petición telefónica. Solicitar esta determinación en el campo: " Datos de interés analíticos"	329761 746761






## Líquido cefalorraquídeo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Ac reagínicos de sífilis (LCR)	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	3 días	Restringido	Prueba disponible en función de resultado en muestra de sangre.	329784
<i>C. neoformans</i> / <i>C.gatti</i> , detección ADN	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		4 horas	Restringido	Pacientes inmunodeprimidos	329771

## Líquido cefalorraquídeo






ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Citomegalovirus, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas* 2 días	Restringido	*El tiempo de emisión puede variar en función de la técnica utilizada.	329771 652722
<b>Cryptococcus neoformans, Ag</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	3 días	Restringido	Pacientes inmunodeprimidos	329784
<b>Cultivo de bacterias</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		4 días	Total		329771
<b>Cultivo de Micobacterias</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1,5 mL	46 días	Total		392686
<b>E. coli K1, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas	Restringido	El tiempo de emisión puede variar en función de la técnica utilizada.	329771

## Líquido cefalorraquídeo


ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Enterovirus, detección ARN (LCR)</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas* 4 días	Restringido	*El tiempo de emisión puede variar en función de la técnica utilizada.	329771 652722
<b>Haemophilus influenzae, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas	Restringido		329771
<b>Listeria monocytogenes, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas	Restringido		329771
<b>Mycobacterium tuberculosis complex, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1,5mL	7 días	Total		392686
<b>Neisseria meningitidis, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas	Restringido		329771



## Líquido cefalorraquídeo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Parechovirus, detección ARN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas* 3 días	Restringido	*El tiempo de emisión puede variar en función de la técnica utilizada.	329771
<b>Streptococcus agalactiae, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas	Restringido		329771
<b>Streptococcus pneumoniae, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas	Restringido		329771
<b>Tinción de BAAR</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		3 días	Total		392686
<b>Tinción de BAAR (Urgente)</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		5 horas	Total		392686 746761


## Líquido cefalorraquídeo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Tinción de Gram</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		2 horas	Total		329771
<b>Virus de Epstein-Barr, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas* 3 días	Restringido	*El tiempo de emisión puede variar en función de la técnica utilizada.	329771 652722
<b>Virus de la varicela-zoster, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas* 3 días	Restringido	*El tiempo de emisión puede variar en función de la técnica utilizada.	329771 652722
<b>Virus del herpes humano 6, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas* 3 días	Restringido	*El tiempo de emisión puede variar en función de la técnica utilizada.	329771 652722
<b>Virus del herpes simple 1+2, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	1 mL	4 horas* 3 días	Restringido	*El tiempo de emisión puede variar en función de la técnica utilizada.	329771 652722

## Líquido de vesícula cutánea

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Virus de la viruela del mono, detección ADN	Swab tapón morado 		3 días	Total		622722
Virus de la varicela-zoster, detección ADN	Swab tapón morado 		3 días	Total		652722
Virus del herpes simple 1+2, detección ADN	Swab tapón morado 		3 días	Total		652722

## Líquido diálisis peritoneal






ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Frascos de hemocultivos 		6 días	Total	Inocular la muestra en un frasco aerobio y otro anaerobio de hemocultivos	329771

Líquido pericárdico						
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm 		6 días	Total		329761
Cultivo de Micobacterias	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm 	5 mL	46 días	Total		392686
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex, detección ADN	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm 		7 días	Restringido		392686
Tinción de BAAR	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm 		3 días	Total		392686

## Líquido pericárdico

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Tinción de BAAR (Urgente)</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm 		5 horas	Total		392686 746761
<b>Tinción de Gram (urgente)</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde y contenedor Portagerm 		2 horas	Total	Disponible como determinación urgente bajo petición telefónica. Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico"	329761 746761

## Líquido pleural






ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm 		6 días	Total		329761
Cultivo de Micobacterias	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	10 mL	46 días	Total		392686
Detección <i>S. pneumoniae</i> , Ag	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		2 horas	Total		329761
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex, detección ADN	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	10 mL	7 días	Restringido		392686
Tinción de BAAR	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	10 mL	3 días	Total		392686

## Líquido pleural

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Tinción de BAAR (Urgente)	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	10 mL	5 horas	Total		392686 746761
Tinción de Gram (urgente)	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm 		2 horas	Total	Disponible como determinación urgente bajo petición telefónica. Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico"	329761 746761

## Líquido sinovial

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm 		6 días	Total		329761
Cultivo de Micobacterias	Tubo estéril tapón de rosca color verde 	10 mL	46 días	Total		392686


Líquido sinovial							
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA	
<b><i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde		10 ml	7 días	Restringido		392686
<b>Tinción de BAAR</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde		10 mL	3 días	Total		392686
<b>Tinción de BAAR (urgente)</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde		10 ml	5 horas	Total	Disponible como determinación urgente bajo petición telefónica. Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico"	392686 746761
<b>Tinción de Gram (urgente)</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde		10 ml	2 horas	Total	Disponible como determinación urgente bajo petición telefónica. Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico"	329761 746161
<b><i>Kingella kingae</i>, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde		3 ml	3 días	Restringido	Restringido a menores de 5 años. Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de interés analítico"	652722



## Líquido sinovial ( infección protésica)






ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm 		10 días	Total		329761
Tinción de Gram (urgente)	Tubo estéril tapón de rosca color verde o contenedor Portagerm 		2 horas	Total	Disponible como determinación urgente bajo petición telefónica. Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico"	329761 746761

## Médula ósea






ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Frascos de hemocultivos 	10 mL por frasco	5 días	Total		329771

Médula ósea							
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA	
<b>Cultivo de Micobacterias</b>	Frasco de hemocultivo para Micobacterias	5 mL	46 días	Total	Solicitar frasco específico al laboratorio de Microbiología	392686	
<b>Leishmania spp, detección ADN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	1 mL	3 días	Restringido	Restringido a pacientes con clínica compatible. Contactar previamente con el laboratorio.	652722	
<b>Tinción de BAAR</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		3 días	Total		392686	
<b>Tinción de Giemsa</b>	Tubo tapón morado anilla negra y Portaobjeto con extensiones de médula ósea 		5 días	Total	<b>Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.</b> Son necesarias 4 extensiones de médula ósea en un portaobjeto	329734	
<b>Tinción de Gram</b>	Tubo tapón morado anilla negra y Portaobjeto con extensiones de médula ósea 		1 día	Total	Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico". <b>Contactar previamente con el laboratorio.</b>	329761	

## Orina

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Enterobacterias con b-lactamasas de espectro ampliado, detección</b>	Frasco estéril tapa roja		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial	374249
<b>Acinetobacter baumannii multirresistente, detección</b>	Frasco estéril tapa roja		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial	374249
<b>Chlamydia trachomatis, detección ADN</b>	Frasco estéril tapa roja		5 mL	7 días	Restringido Esta determinación está restringida a varones. Solicitar como perfil <b>ITS orina</b> .	652722
<b>Citomegalovirus, detección ADN</b>	Frasco estéril tapa roja		5 mL	5 días	Restringido Determinación restringida a recién nacidos (<21 días)	652722
<b>Cultivo de bacterias</b>	Contenedor estéril de boca ancha con dispositivo para llenar un tubo tapón amarillo con anilla negra.		5 - 10 mL	3 días	Total	329765

## Orina

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de Micobacterias</b>	Frasco estéril tapa roja 	25 mL	46 días	Total		392686
<b>Detección <i>L. pneumophila</i>, Ag</b>	Contenedor estéril de boca ancha con dispositivo para llenar un tubo tapón amarillo con anilla negra 	5 mL	2 horas	Restringido	Restringido según protocolo de manejo de neumonía	329765
<b>Detección <i>S. pneumoniae</i>, Ag</b>	Contenedor estéril de boca ancha con dispositivo para llenar un tubo tapón amarillo con anilla negra 	5 mL	2 horas	Restringido	Restringido según protocolo de manejo de neumonía	329765
<b>Enterobacterias productoras de carbapenemasas, detección</b>	Frasco estéril tapa roja 		5 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial	374249
<b>Estudio parásitos (<i>Schistosoma haematobium</i>)</b>	Frasco estéril tapa roja/ Contenedor orina 24 horas 	100 mL	3 días	Total	Se aconseja enviar al laboratorio un volumen de orina superior a 100 mL, incluso toda la orina de 24 horas.  La rentabilidad aumenta si la muestra se recoge entre las 10 y las 15 horas del día y si se realiza ejercicio físico antes de la recogida.	329764


## Orina

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex, detección ADN	Frasco estéril tapa roja 	25mL	7 días	Total		392686
<i>Mycoplasma genitalium</i> , detección ADN	Frasco estéril tapa roja 	5 mL	7 días	Total	Esta determinación está restringida a varones. Solicitar como perfil <b>ITS orina</b> .	652722
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> , detección ADN	Frasco estéril tapa roja 	5 mL	7 días	Total	Esta determinación está restringida a varones. Solicitar como perfil <b>ITS orina</b> .	652722
<i>Staphylococcus aureus</i> resistente metilina, detección	Frasco estéril tapa roja 		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial	374249
Tinción de BAAR	Frasco estéril tapa roja 	25 mL	3 días	Total		392686


## Orina

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Tinción de BAAR (Urgente)</b>	Frasco estéril tapa roja 	25 mL	5 horas	Total		392686 746761
<b>Virus BK, Detección ADN</b>	Frasco estéril tapa roja 	5 mL	7 días	Restringido		652722


## Orina (bolsa pediátrica)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de bacterias</b>	Bolsa de orina pediátrica y contenedor estéril tapa roja 	5 mL	3 días	Total	Introducir la orina recogida en la bolsa en un contenedor estéril.	329765


## Orina (catéter)


ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Contenedor estéril de boca ancha con dispositivo para llenar un tubo tapón amarillo con anilla negra		5-10 mL	3 días	Total	329765

## Orina (media)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Contenedor estéril de boca ancha con dispositivo para llenar un tubo tapón amarillo con anilla negra		5-10 mL	3 días	Total	329765

## Orina (postmasaje prostático)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Contenedor estéril de boca ancha con dispositivo para llenar un tubo tapón amarillo con anilla negra		5-10 mL	3 días	Total	Esta muestra tiene que venir acompañada de una muestra de semen. 329765

Orina (punción)						
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Contenedor anaerobios (Portagerm)		5 mL	4 días	Total	329765

Orina (sonda vesical)						
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Contenedor estéril de boca ancha con dispositivo para llenar un tubo tapón amarillo con anilla negra		5-10 mL	3 días	Total	329765




## Pelo

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de hongos	Placa de Petri sellada con Parafilm o frasco estéril con tapa roja 		38 días	Total		329761
Examen microscópico en fresco	Placa de Petri sellada con Parafilm o frasco estéril con tapa roja 		3 días	Total		329761

## Piel (escamas)


ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de hongos	Placa de Petri sellada con Parafilm o frasco estéril con tapa roja 		38 días	Total	Seleccionar parámetro complementario (localización).	329761
Examen microscópico en fresco	Placa de Petri sellada con Parafilm o frasco estéril con tapa roja 		3 días	Total	Seleccionar parámetro complementario (localización).	329761

## Placenta

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Frasco estéril tapa roja 		6 días	Total		329761
Tinción de Gram (urgente)	Frasco estéril tapa roja 		2 Horas	Total	Disponible como determinación urgente bajo petición telefónica. Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico"	329761 746761

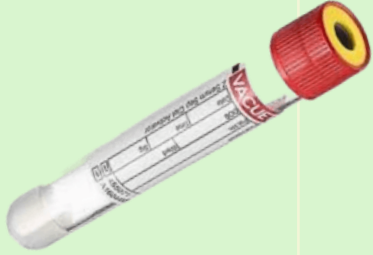
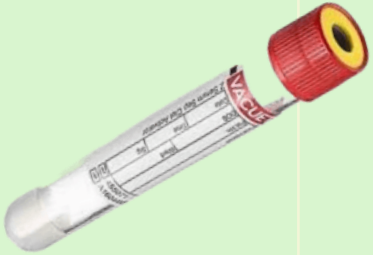
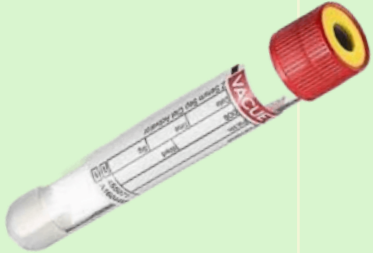
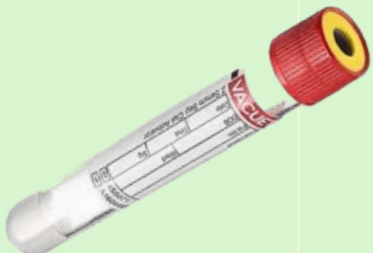
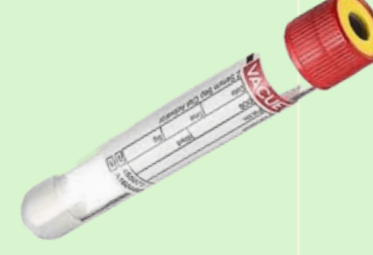
## Prótesis articular

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Contenedor estéril de tamaño adecuado a la muestra 	400 mL de solución Ringer	12 días	Total	Indicar procedencia/localización de la prótesis	329761

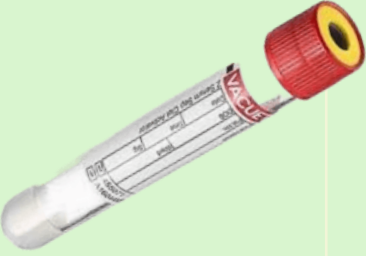
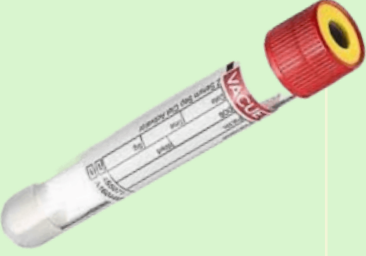

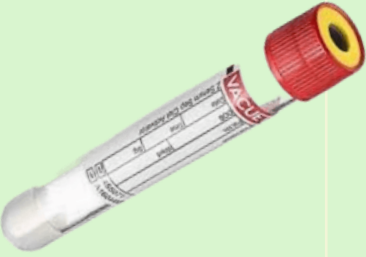
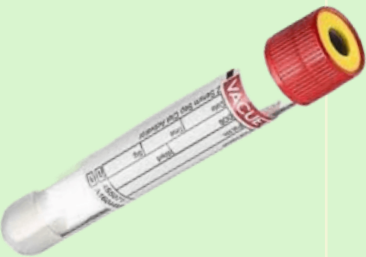
Prótesis valvular						
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Frasco estéril tapa roja 		12 días	Total	Cubrir la prótesis con solución Ringer	329761

Sala limpia						
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Placas con medio TSA y placas RODAC 		7 días	Restringido	Determinación restringida para el Servicio de Medicina Preventiva. Contactar previamente con el Laboratorio de Microbiología.	374249

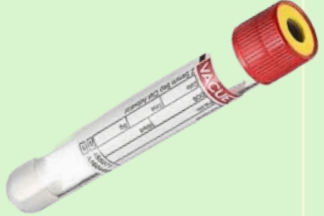




## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Ac reagínicos de sífilis</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Restringido	Prueba disponible en función de resultado previo	329784
<b>Antígeno beta-glucano</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	3 días	Restringido	Restringido según protocolo. Contactar previamente con el laboratorio.	329784
<b>Aspergillus spp., Ag galactomanano</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	3 días	Restringido	Prueba disponible en Atención Especializada	329784
<b>Bartonella henselae, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	8 días	Total	Es necesario realizar dos extracciones de sangre al paciente separadas 2-3 semanas	329784
<b>Bartonella quintana, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	8 días	Total	Es necesario realizar dos extracciones de sangre al paciente separadas 2-3 semanas	329784


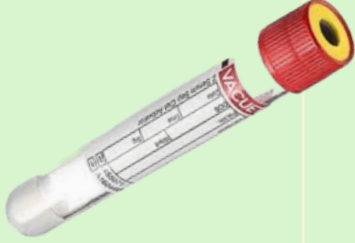

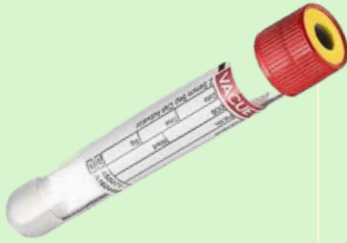

## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b><i>Borrelia burgdorferi</i>, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b><i>Brucella spp.</i>, serología</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b><i>Chlamydia pneumoniae</i>, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total	Es necesario realizar dos extracciones de sangre al paciente separadas 2-3 semanas	329784
<b><i>Chlamydia pneumoniae</i>, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total		329784
<b>Citomegalovirus, Ac(IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	3 horas* 4 días	Total	*Prueba restringida según protocolo "Donantes de órganos". Contactar con el laboratorio antes de tomar la muestra	329784



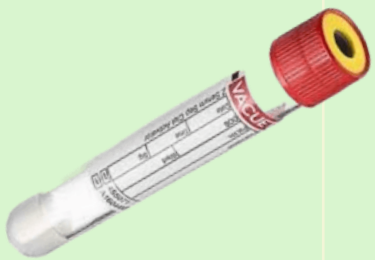

## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Citomegalovirus, Ac(IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b>Citomegalovirus, cuantificación ADN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	5 días	Restringido		652722
<b>Citomegalovirus, detección ADN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	5 días	Restringido		652722
<b>Citomegalovirus, resistencias (foscarnet)</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	15 días	Restringido		652722
<b>Citomegalovirus, resistencias (ganciclovir)</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	15 días	Restringido		652722






## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b><i>Coxiella burnetii</i>, Ac (IgG) fase I</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Restringido	Prueba disponible en función de resultado previos	329784
<b><i>Coxiella burnetii</i>, Ac (IgG) fase II</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Restringido	Prueba disponible en función de resultado previos	329784
<b><i>Coxiella burnetii</i>, Ac (IgM) en fase II</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b><i>Cryptococcus neoformans</i>, Ag</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	3 días	Restringido	Prueba disponible en Atención Especializada Restringida a pacientes inmunodeprimidos	329784
<b>Cultivo bacterias (pediatría)</b>	Frasco de hemocultivo pediátrico 	según peso	6 días	Total		329771






## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de bacterias</b>	Frascos de hemocultivos 	10 mL por frasco	6 días	Total	Se requieren dos extracciones de sangre; un frasco aerobio y uno anaerobio en cada extracción.  Para diagnóstico de bacteriemia relacionada con catéter seguir protocolo específico. Contactar con laboratorio si necesitan más información	329771
<b>Cultivo de Micobacterias</b>	Frasco específico. Solicitar al laboratorio de Microbiología	5 mL	46 días	Total	Recomendado en pacientes inmunodeprimidos. Solicitar frascos al laboratorio de Microbiología	392686
<b>Detección <i>Plasmodium</i> spp, Ag</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	5 mL	2 horas	Restringido	Restringido según protocolo de manejo paludismo	374249
<b><i>Echinococcus granulosus</i>, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total		329784
<b><i>Entamoeba histolytica</i>, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total		329784


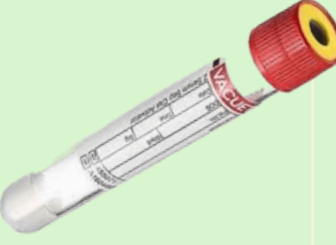
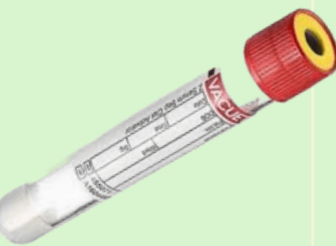

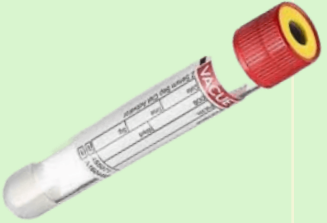


Sangre							
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA	
<b>Enterovirus, detección ARN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	7 ml	5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722	
<b>Estudio de filarias (test Knott)</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	5 mL	3 días	Total		329764	
<b>Estudio de parásitos: gota gruesa</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	5 mL	3 días	Total		329764	
<b>HTLV 1+2, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 ml	3 horas* 7 días	Restringido	*Prueba restringida según protocolo "Donantes de órganos". Contactar con el laboratorio antes de tomar la muestra	329764	
<b>Interferón gamma, liberación (TB estimulada)</b>	Tubos específicos Quantiferon 	1 mL	7 días	Restringido	Prueba restringida según protocolos. Contactar con el laboratorio de Microbiología antes de la toma de muestra.	329784	


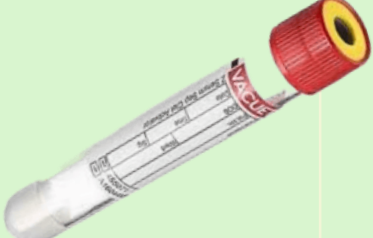

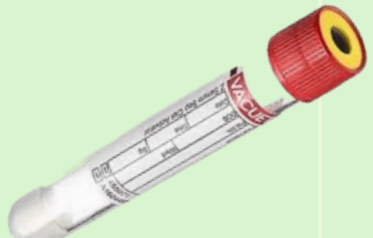

## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b><i>Legionella pneumophila</i> (serogrupo 1), Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total	Es necesario realizar dos extracciones de sangre al paciente realizadas con 2-3 semanas de diferencia	329784
<b><i>Leishmania spp.</i>, detección ADN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	7 mL	5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b><i>Leishmania spp.</i>, Ac</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b><i>Leptospira spp.</i>, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b><i>Mycoplasma pneumoniae</i>, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total	Es necesario realizar dos extracciones de sangre al paciente realizadas con 2-3 semanas de diferencia	329784



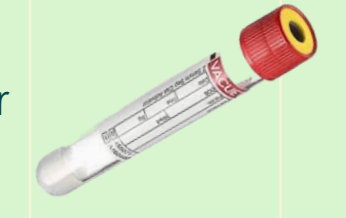



## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b><i>Mycoplasma pneumoniae</i>, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b><i>Parvovirus B19</i>, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b><i>Parvovirus B19</i>, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b><i>Plasmodium spp</i>, detección ADN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	7 mL	5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b><i>Rickettsia conorii</i>, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total	Es necesario realizar dos extracciones de sangre al paciente realizadas con 2-3 semanas de diferencia.	329784






## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>SARS Coronavirus 2, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total		329784
<b>SARS Coronavirus 2, detección ARN</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	1 día	Restringido	Restringida a pacientes Long COVID y la unidad de Enfermedades Infecciosas	329763
<b>Schistosoma spp, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total		329784
<b>Strongyloides spp, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total		329784
<b>Taenia solium, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 ml	7 días	Total		329784






## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Tinción de Giemsa</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	5 mL	5 días	Total		329761
<b>Toxocara canis, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total		329784
<b>Toxoplasma gondii, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b>Toxoplasma gondii, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	5 días	Restringido	Prueba disponible en función de resultado previos	329784
<b>Toxoplasma gondii, Ac (IgG) (avidez)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 ml	7 días	Restringido	Prueba disponible en función de resultado previos	329784
<b>Treponema pallidum, Ac</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784






## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b><i>Treponema pallidum</i>, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total	Determinación restringida a niños menores de 3 meses. Prueba disponible en función de resultados previo	329784
<b><i>Trypanosoma cruzi</i>: microhematocrito</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	5 mL	3 días	Total		329764
<b><i>Trypanosoma cruzi</i>, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	3 horas* 4 días	Total	Prueba restringida según protocolo "Donantes de órganos". Contactar con el laboratorio antes de la toma de la muestra	329784 746761
<b><i>Trypanosoma cruzi</i>, detección ADN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	6 días	Restringido		652722
<b>Virus BK, detección ADN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	7 días	Restringido		652722

## Sangre

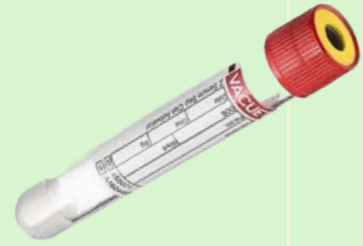

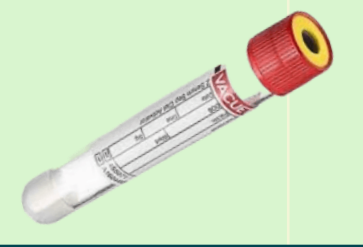
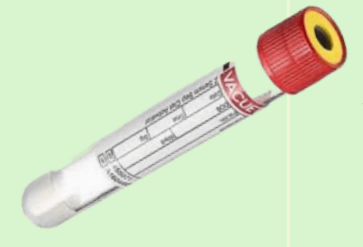

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Virus de Epstein-Barr, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b>Virus de Epstein-Barr, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b>Virus de Epstein-Barr, cuantificación ADN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	6 días	Restringido		652722
<b>Virus de Epstein-Barr, detección ADN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	3 días	Restringido		652722
<b>Virus de la hepatitis A, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784

## Sangre

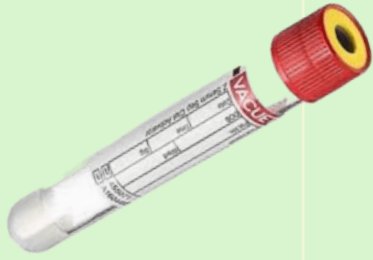
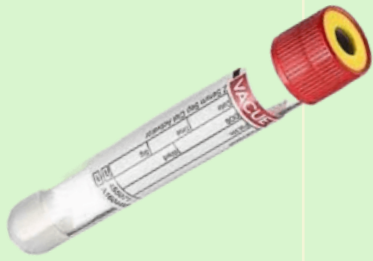
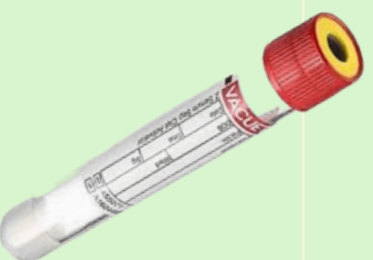
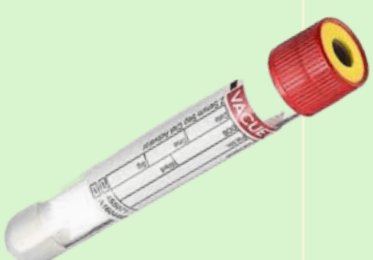
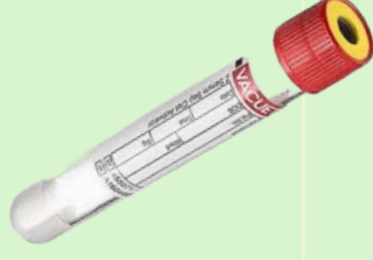
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Virus de la hepatitis A, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b>Virus de la hepatitis B (Ag c), Ac</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	3 horas* 4 días	Restringido	*Prueba restringida según protocolo "Donantes de órganos". Contactar con el laboratorio antes de la toma de la muestra	329784 746761
<b>Virus de la hepatitis B (Ag c), Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Restringido	Prueba disponible en función de resultado previos	329784
<b>Virus de la hepatitis B (Ag s), Ac (cuantificación; UI)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b>Virus de la hepatitis B, (Ag e), Ac</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Restringido	Prueba disponible en función de resultado previos	329784



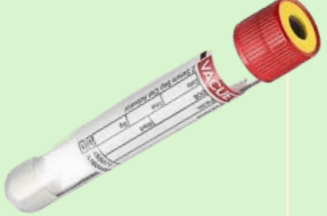




## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Virus de la hepatitis B, Ag e</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Restringido	Prueba disponible en función de resultado previos	329784
<b>Virus de la hepatitis B, Ag s</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b>Virus de la hepatitis B, Ag s (test rápido)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	3 horas	Restringido	Prueba restringida según protocolo de la Comisión de infecciones	329784
<b>Virus de la hepatitis B, cuantificación ADN (UI)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	10 mL	3 horas* 10 días	Restringido	*Prueba restringida según protocolo "Donantes de órganos". Contactar con el laboratorio antes de la toma de la muestra	652722 746761
<b>Virus de la hepatitis B, genotipado</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	10 mL	30 días	Restringido		652722


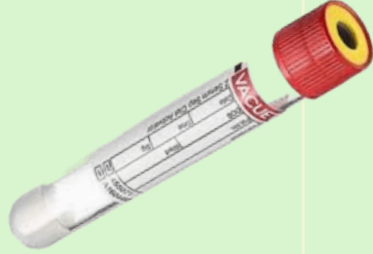
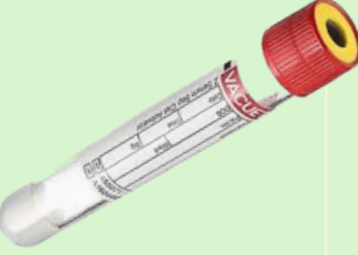
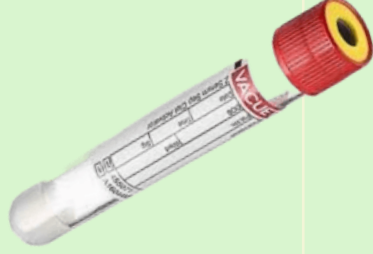
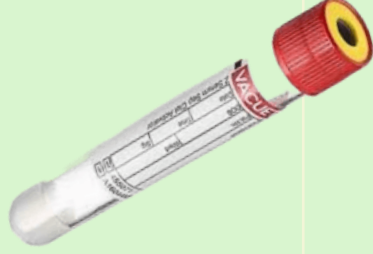
## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Virus de la hepatitis B, resistencias</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	10 mL	30 días	Restringido		652722
<b>Virus de la hepatitis C, Ac</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b>Virus de la hepatitis C, Ac (test rápido)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	3 horas	Restringido	Prueba restringida según protocolo de la Comisión de infecciones	329784
<b>Virus de la hepatitis C, cuantificación ARN (UI)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	10 mL	3 horas* 10 días	Restringido	*Prueba restringida según protocolo "Donantes de órganos". Contactar con el laboratorio antes de la toma de la muestra	652722 746761
<b>Virus de la hepatitis C, genotipado</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	10 mL	10 días	Restringido		652722

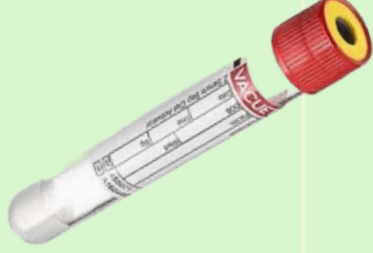
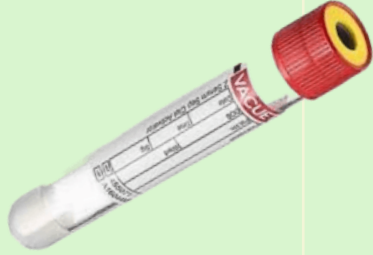
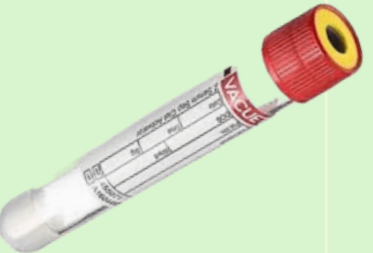


## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Virus de la hepatitis D, Ac</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Restringido	Determinación restringida a pacientes portadores de HBs Ag	329784
<b>Virus de la hepatitis E, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total		329784
<b>Virus de la hepatitis E, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	7 días	Total		329784
<b>Virus de la inmunodeficiencia humana 1, cuantificación ARN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	3 horas* 7 días	Restringido	*Prueba restringida según protocolo "Donantes de órganos". Contactar con el laboratorio antes de la toma de la muestra	652722
<b>Virus de la inmunodeficiencia humana 1, detección ADN proviral</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	12 días	Restringido		652722

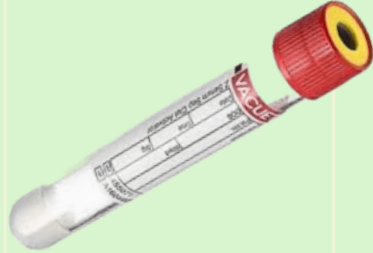
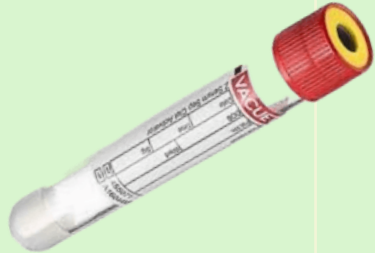

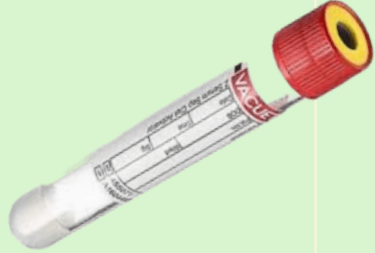

## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Virus de la inmunodeficiencia humana 1, resistencias</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	35 días	Restringido		652722
<b>Virus de la Inmunodeficiencia humana 1+2, Ac+ Ag p24</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b>Virus de la Inmunodeficiencia humana 1+2, Ac+ Ag p24 (test rápido)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	3 horas	Restringido	Prueba restringida según protocolo de la Comisión de infecciones	329784 746761
<b>Virus de la parotiditis, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	5 días	Total		329784
<b>Virus de la parotiditis, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	5 días	Total		329784



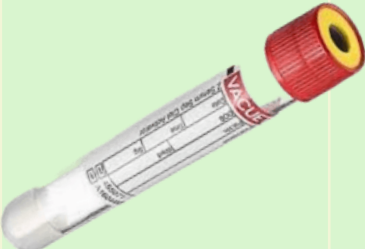
## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Virus de la rubeola, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b>Virus de la rubeola, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	5 días	Total		329784
<b>Virus de la varicela-zóster Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	5 días	Total		329784
<b>Virus de la varicela-zóster, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	5 días	Total		329784
<b>Virus del dengue, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784


## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Virus del dengue, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b>Virus del dengue, Ag</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	4 días	Total		329784
<b>Virus del herpes humano 6, detección ADN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	6 días	Restringido		652722
<b>Virus del herpes simple 1+2, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	5 días	Total		329784
<b>Virus del herpes simple 1+2, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	5 días	Total		329784

## Sangre

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Virus del herpes simple 1+2, detección ADN</b>	Tubo tapón morado anilla negra 	10 mL	3 días	Restringido		652722
<b>Virus del sarampión, Ac (IgG)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	5 días	Total		329784
<b>Virus del sarampión, Ac (IgM)</b>	Tubo sin anticoagulante con gel separador tapón rojo anilla amarilla 	7 mL	5 días	Total		329784

## Secreción broncoalveolar (lavado)






ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Adenovirus, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		5 días	Restringido	Indicado en diagnóstico de neumonía en paciente Inmunodeprimido. Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722

## Secreción broncoalveolar (lavado)






ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b><i>Aspergillus</i> spp., Ag galactomanano</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	10 ml	3 días	Restringido	Determinación restringida según protocolo.	329784
<b><i>Aspergillus</i> spp., Ag galactomanano (prueba rápida)</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	10 mL	3 horas	Restringido	Determinación restringida según protocolo.	329763
<b>Citomegalovirus, detección antígeno precoz</b>	Swabs tapón morado 	5 mL	4 días	Restringido	Neumonía en Inmunodeprimidos	652722
<b>Cultivo de bacterias</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	10 mL	5 días	Total		329763
<b>Cultivo de hongos</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	10 mL	15 días	Total	En estudios de <i>Aspergillus</i>	329763
<b>Cultivo de <i>Legionella pneumophila</i></b>	Tubo estéril tapón de rosca 	10 mL	7 días	Total		329763








## Secreción broncoalveolar (lavado)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de Micobacterias</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	10 mL	46 días	Total		392686
<b>Cultivo de virus (citomegalovirus)</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	5 mL	30 días	Restringido	Neumonía en Inmunodeprimidos	652722
<b>Enterovirus, detección ARN</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		5 días	Restringido	Indicado en diagnóstico de neumonía en paciente Inmunodeprimido. Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b>Metapneumovirus, detección ARN</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		5 días	Restringido	Indicado en diagnóstico de neumonía en paciente Inmunodeprimido. Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b>Mycoplasma pneumoniae, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		5 días	Restringido	Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722






## Secreción broncoalveolar (lavado)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b><i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		7 días	Total		392686
<b><i>Pneumocystis jirovecii</i>, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	3 mL	1 día	Restringido	Determinación restringida según protocolo.	329763
<b>Rhinovirus, detección ARN</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		5 días	Restringido	Indicado en diagnóstico de neumonía en paciente Inmunodeprimido. Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b>Tinción de BAAR</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	10 mL	3 días	Total		392686
<b>Tinción de BAAR (Urgente)</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	10 mL	5 horas	Total		392686 746761

## Secreción broncoalveolar (lavado)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Tinción de Gram</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	10 mL	1 día	Total	Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico". Contactar previamente con el laboratorio.	329763
<b>Virus de la influenza A, detección ARN</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		5 horas	Restringido	Indicado en diagnóstico de neumonía en paciente Inmunodeprimido. Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	329763
<b>Virus de la influenza B, detección ARN</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		5 horas	Restringido	Indicado en diagnóstico de neumonía en paciente Inmunodeprimido. Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	329763
<b>Virus de la parainfluenza 1,2,3,4, detección ARN</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		5 días	Restringido	Indicado en diagnóstico de neumonía en paciente Inmunodeprimido. Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	652722
<b>Virus respiratorio sincitial, detección ARN</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		5 horas	Restringido	Indicado en diagnóstico de neumonía en paciente Inmunodeprimido. Contactar con el laboratorio antes de la toma de muestra.	329763

## Secreción bronquial (aspirado)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de bacterias</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	5 mL	5 días	Total		329763
<b>Cultivo de <i>Legionella pneumophila</i></b>	Tubo estéril tapón de rosca 	5 mL	7 días	Total		329763
<b>Cultivo de Micobacterias</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	5 mL	46 días	Total		392686
<b><i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca 	5 mL	7 días	Total		392686
<b>SARS Coronavirus 2, detección ARN</b>	Swab tapón morado 	5 mL	5 horas	Restringido	Restringido a pacientes hospitalizados.	329763

## Secreción bronquial (aspirado)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Tinción de BAAR	Tubo estéril tapón de rosca 	5 mL	3 días	Total		392686
Tinción de BAAR (Urgente)	Tubo estéril tapón de rosca 	5 mL	5 horas	Total		392686 746761
Tinción de Gram	Tubo estéril tapón de rosca 	5 mL	1 día	Total	Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico". Contactar previamente con el laboratorio.	392686



## Secreción bronquial (catéter telescopado)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Tubo estéril tapón de rosca 		5 días	Total		329763
Cultivo de hongos	Tubo estéril tapón de rosca 		5 días	Total		329763
Cultivo de <i>Legionella pneumophila</i>	Tubo estéril tapón de rosca 		7 días	Total		329763
Cultivo de Micobacterias	Tubo estéril tapón de rosca 		46 días	Total		392686
Tinción de BAAR	Tubo estéril tapón de rosca 		3 días	Total		392686

## Secreción gastroduodenal (aspirado)


ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de Micobacterias</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		46 días	Total	Muestra indicada en niños menores de 14 años. Contactar previamente con el laboratorio	392686
<b><i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex, detección ADN</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		7 días	Total	Muestra indicada en niños menores de 14 años. Contactar previamente con el laboratorio	392686
<b>Tinción de BAAR</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		3 días	Total	Muestra indicada en niños menores de 14 años. Contactar previamente con el laboratorio	392686
<b>Tinción de BAAR (Urgente)</b>	Tubo estéril tapón de rosca color verde 		5 horas	Total	Muestra indicada en niños menores de 14 años. Contactar previamente con el laboratorio	392686 746761
<b>Detección de <i>Giardia lamblia</i></b>	Frasco estéril tapa roja 	0,5 ml	2 horas	Total	Muestra indicada en niños menores de 14 años. Contactar previamente con el laboratorio.	329764

## Secreción seno paranasal (aspirado)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Tubo estéril tapón de rosca 		5 días	Total		309763
Tinción de Gram	Tubo estéril tapón de rosca 		2 días	Total		309763




## Secreción traqueal (aspirado)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Enterobacterias con b-lactamasa de espectro ampliado, detección</b>	Tubo estéril tapón de rosca		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas	374249
<b><i>Acinetobacter baumannii</i> multirresistente, detección</b>	Tubo estéril tapón de rosca		4 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas	374249
<b>Cultivo de bacterias</b>	Tubo estéril tapón de rosca		5 días	Total		392686
<b>Cultivo de Micobacterias</b>	Tubo estéril tapón de rosca		46 días	Total		392686
<b>Enterobacterias productoras de carbapenemasas, detección</b>	Tubo estéril tapón de rosca		5 días	Restringido	Restringido al equipo de infección nosocomial y otras unidades asistenciales autorizadas	374249




## Secreción traqueal (aspirado)

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Tinción de BAAR</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		3 días	Total		392686
<b>Tinción de BAAR (Urgente)</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		5 horas	Total		392686 746761
<b>Tinción de Gram (urgente)</b>	Tubo estéril tapón de rosca 		2 horas	Total	Solicitar esta determinación en el campo: "Datos de Interés analítico". Contactar previamente con el laboratorio.	329763 746761


## Semen


ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Frasco estéril tapa roja 		4 días	Total	Las muestras de semen o secreción prostática <b>SIEMPRE</b> deben ir acompañadas de dos muestras de <b>orina</b> (pre y post eyaculación).	329765


## Úlcera genital

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<i>Chlamydia trachomatis</i> (LGV), detección ADN	Swab tapón morado 		7 días	Total	Solicitar como <b>Perfil ITS úlcera genital</b>	652722
<i>T. pallidum</i> , detección ADN	Swab tapón morado 		7 días	Total	Solicitar como <b>Perfil ITS úlcera genital</b>	652722
Virus del herpes simple 1+2, detección ADN	Swab tapón morado 		7 días	Total		652722

## Uña

ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
<b>Cultivo de hongos</b>	Placa de Petri sellada con parafilm o Frasco estéril tapa roja 		38 días	Total	Seleccionar parámetro complementario (localización).	329761

Uña						
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Examen microscópico en fresco	Placa de Petri selada con parafilm o Frasco estéril tapa roja 		3 días	Total	Seleccionar parámetro complementario (localización).	329761

Válvula cardíaca						
ANÁLISIS	CONTENEDOR	VOLUMEN REQUERIDO	TIEMPO DE RESPUESTA	DISPONIBILIDAD	CONSIDERACIONES ESPECIALES	TELÉFONO DE CONSULTA
Cultivo de bacterias	Frasco estéril tapa roja 		12 días	Total	Añadir suero fisiológico estéril	329761